

S I M P L E X

By

ASSODONT





Banco stellare a tre posti.  
*Three station star-shaped  
 workbench,*  
 (Dim. 3000x3000x910 h mm)

Una linea di banchi dal design estremamente semplice e funzionale. In tutte le fasi della progettazione è stato dato ampio spazio ai più scrupolosi criteri tecnico-operativi e al rispetto delle norme di sicurezza comunitarie garantite dalla marcatura CE.

La rinnovata serie SIMPLEX è il risultato dell'evoluzione ad alto livello del laboratorio odontotecnico, resa possibile dall'affermata esperienza produttiva, riconosciuta alla nostra azienda a livello internazionale.

SIMPLEX è il perfetto punto di incontro tra tecnica, ergonomia, igienicità e design.

Tutti i banchi sono dotati di impianto elettrico, gas e aria di serie e predisposizione per l'aspirazione e la strumentazione a rientro.

Grazie all'ampia gamma di accessori applicabili, ogni operatore può personalizzare il proprio posto di lavoro dandogli un tocco di unicità.

*Simplex, is a line of workbenches original for its pleasing and functional design.*

*The accurate choice of materials and equipment, the most ergonomic and technical solutions together with the respect of safety rules, have always been the main guidelines during project and development phases.*

*The renewed SIMPLEX line is the result of the greatest dental labs' evolution, due to a well-known and established production experience recognise to our Company worldwide. SIMPLEX line is the meltingpot among technological requirements, ergonomics, hygiene and pleasant design.*

*Each workbench is complete with electricity, gas and air connections. It is already arranged for the suction apparatus and retractable instruments. Thanks to the wide range of accessories available, each operator can personalize his working station making it unic.*

Sorrisi più facili  
 con laboratori  
 Assodont!  
 Easier smiles  
 with  
 Assodont labs!



Banco a due posti con cassonetto di servizio alto.  
*Two station workbench complete with high service box.*  
(Dim. 1910x675x910 h mm)



Banco ad un posto con cassonetto di servizio ribassato.  
*One station workbench with lowered service box.*  
(Dim. 1235x675x910 h mm)

**E**COLOGICAL BOX  
è l'unità operativa concepita per salvaguardare la salute dell'operatore nelle operazioni di sgrossatura e finitura.

Sistema aspirante a motore ad elevata portata e silenziosità, garanzia contro l'inalazione di polveri nocive prodotte durante la fresatura di resine, gessi e metalli.

L'ampio spazio interno permette all'operatore di esprimere al meglio le proprie capacità professionali, senza intralci o rallentamenti.

La postazione di lavoro è ben illuminata da due lampade a luce fredda (18W).

Copertura in plexiglass incernierata a ribalta, visiera di protezione in vetro temperato.

*ECOLOGICAL BOX work unit has been conceived to protect dental technician's health during roughing and finishing operations.*

*It is provided with a noisless, high-power motor suction system.*

*The suction apparatus collects dust in a special filtering container and prevent technicians from inhaling resins, gypsum and polluting metal dusts produced while milling.*

*The roomy internal working place grants a functional task.*

*The working place is illuminated by two 18W cold light lamps. Hinged lift, up cover in plexiglass, tempered glass protective face shield.*



Ecological Box.  
(Dim. 760x820x1130h) mm

...protagonisti  
del tuo  
laboratorio!

...the main  
characters  
of your  
laboratory!



❶ Piano in patch estremamente resistente, con rifiniture ergonomiche.

*Patch hard table top, complete with rounded finishing.*

❷ Nuova mensola portalavori con console portastrumenti incorporata.

Cassetto anatomico per appoggio avambracci.

*New work shelf provided with console for accessories.*

*Anatomical armrest for the forearms.*

❸ Interno operativo Ecological Box.

Caviglia regolabile in legno duro.

Contenitore estraibile sotto il convogliatore aspirante per recupero materiale refluo.


Supporto inclinato in PVC per alloggiamento turbina, micromotore, scalpello pneumatico e siringa a.c., alimentazione elettrica 220V.

*Ecological Box's internal working place.*

*Removable inclined base in hard wood.*

*Removable container place under the extractor to collect recyclable materials.*

*Inclined PVC support for turbine, micro motor, pneumatic chisel and c.a. blower housing, 220V electricity power supply.*

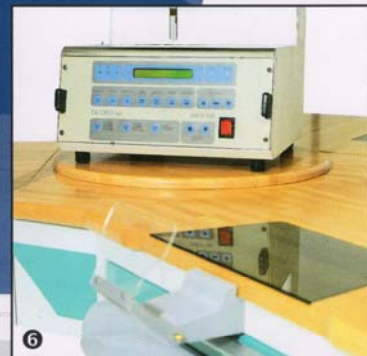

④ Caviglia aspirante in legno duro con conchiglia di protezione.

⑤ Caviglia aspirante in PVC con protezione reclinabile. Vetro intercambiabile di protezione incassato sulla postazione di lavoro.

⑥ Piano rotante a 360° per condivisione di attrezzature. Vetro intercambiabile di protezione incassato sulla postazione di lavoro.

⑦ Pannello di accesso al sistema filtrante.


④ Suction base in hard wood complete with rubber protective shell.

⑤ Suction base in PVC with adjustable protective shield.

⑥ 360° revolving base to share equipment.

Removable protective glass sunk into the table top.

⑦ Panel to gain access to the filtering system.

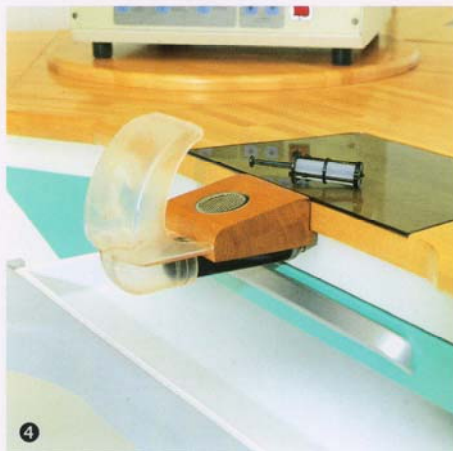

Via Pre Jacobino, 3  
31050 MIANE (Tv) Italy  
phone:  
+39.0438.960.011  
fax:  
+39.0438.893.058  
e-mail: [assodont@tmn.it](mailto:assodont@tmn.it)

# ASSODONT

ARREDAMENTI & FORNITURE DENTALI  
FURNITURE & DENTAL EQUIPMENT